

playcare

CARE ONEv2



Instrucciones / Instructions / Instruções  
Instructions / Anweisungen

Componentes / Components / Componentes / Composants /  
Komponenten



ES

- |    |                               |     |                                 |
|----|-------------------------------|-----|---------------------------------|
| 1. | Freno de mano                 | 7.  | Botón bloqueo ruedas delanteras |
| 2. | Empuñadura                    | 8.  | Bolsa extraíble                 |
| 3. | Botón bloqueo freno           | 9.  | Asiento                         |
| 4. | Ajuste de altura del manillar | 10. | Soporte lateral                 |
| 5. | Bolsillo trasero              | 11. | Respaldo                        |
| 6. | Dispositivo de bloqueo        | 12. | Reflectante de seguridad        |

## EN

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Handbrake                   | 7. Front wheel lock button |
| 2. Handle                      | 8. Removable bag           |
| 3. Brake lock button           | 9. Seat                    |
| 4. Handlebar height adjustment | 10. Side support           |
| 5. Back pocket                 | 11. Backrest               |
| 6. Locking device              | 12. Safety reflectors      |

## PT

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Travão de mão                  | dianteira                    |
| 2. Cabo                           | 8. Saco removível            |
| 3. Botão de bloqueio do travão    | 9. Assento                   |
| 4. Regulação da altura do guiador | 10. Suporte lateral          |
| 5. Bolso de trás                  | 11. Apoio                    |
| 6. Dispositivo de bloqueio        | 12. Reflectante de segurança |
| 7. Botão de bloqueio da roda      |                              |

## FR

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Frein à main                    | 7. Bouton de verrouillage roues avant |
| 2. Poignée                         | 8. Sac amovible                       |
| 3. Bouton de verrouillage du frein | 9. Siège                              |
| 4. Réglage de la hauteur du guidon | 10. Accoudoir latéral                 |
| 5. Poche arrière                   | 11. Dossier                           |
| 6. Dispositif de verrouillage      | 12. Bande réfléchissante de sécurité  |

## DE

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Handbremse              | 7. Vorderräder-Blockierknopf |
| 2. Handgriff               | 8. Abnehmbare Tasche         |
| 3. Bremsblockierknopf      | 9. Sitz                      |
| 4. Lenker-Höhenverstellung | 10. Seitenstütze             |
| 5. Hintere Tasche          | 11. Rückenlehne              |
| 6. Blockiervorrichtung     | 12. Sicherheitsreflektor     |


Freno de mano ruedas traseras / Handbrake rear wheels /  
Freio da roda traseira / Frein à main roues arrière / Hinterräder-  
Handbremse.




Bloqueo de las ruedas traseras / Rear wheel lock /  
Bloqueio das rodas traseiras / Verrouillage des roues arrière /  
Hinterräder-Blockierung.



Desbloqueo de las ruedas traseras / Rear wheel unlock /  
Desbloqueio as rodas traseiras / Déverrouillage des roues  
arrière / Lösen der Hinterräder-Blockierung.

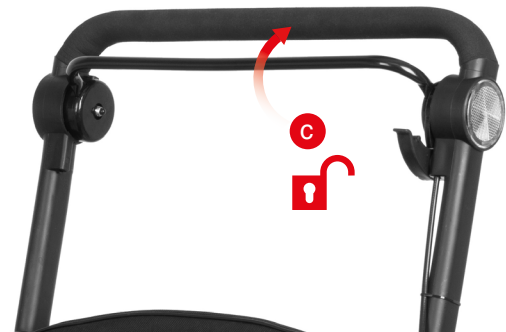

Bloqueo de las ruedas delanteras / Front wheels lock /  
Bloqueio das rodas dianteiras / Verrouillage des roues avant /  
Vorderräder-Blockierung.

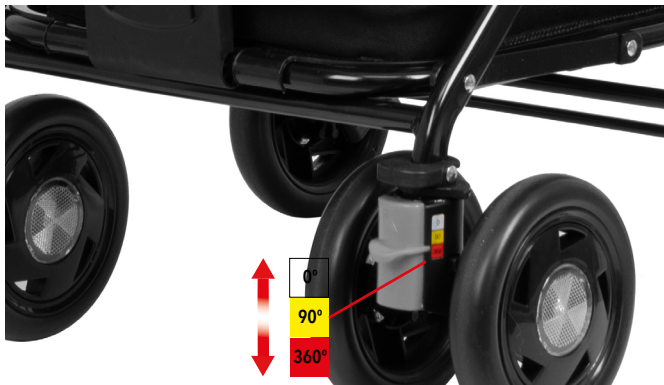

Empuñadura ajustable en altura / Height adjustable handle  
/ Alça ajustável em altura / Poignée réglable en hauteur /  
Höhenverstellbarer Handgriff.



Asiento / Tapa portaobjetos / Seat / Slide Top / Assento /  
Tampa deslizante / Siège / Rabat compartiment de rangement  
/ Sitz / Abdeckung Ablagefach.



Bolsa extraíble. Capacidad 30 l. / Removable bag. Capacity 30 l. / Saco removível. Capacidade 30 l. Sacoche amovible. Contenance 30 l. / Abnehmbare Tasche 30 l Volumen.



Plegado compacto / Compact folding / Dobra compacta / Pliage compact / Kompaktes Zusammenklappen.



#### **Aviso**

Está totalmente prohibido utilizar este carro de la compra como una silla de ruedas. Dispone de freno de seguridad indispensable para poder usar el carro como asiento. Peso máximo del usuario: 120 kg.

#### **Notice**

It is strictly forbidden to use this shopping cart as a wheelchair. It has a safety brake essential to use the cart as a seat. Maximum user weight: 120 kg.

#### **Aviso**

É estritamente proibido usar este carrinho de compras como cadeira de rodas. Tem um travão de segurança essencial para poder utilizar o carro como assento. Peso máximo do utente: 120 kg.

#### **Avertissement**

Il est strictement interdit d'utiliser ce caddie déambulateur comme fauteuil roulant. Il dispose d'un frein de sécurité, indispensable pour pouvoir utiliser le caddie comme siège. Poids maximal de l'utilisateur: 120 kg.

#### **Hinweis**

Es ist verboten, diesen Einkaufswagen als Rollstuhl zu benutzen. Er ist mit einer Sicherheitsbremse ausgestattet, die unbedingt betätigt werden muss, um den Wagen als Sitz zu benutzen. Max. Gewicht des Benutzers 120 kg.



Especificaciones / Specifications / Especificações / Caractéristiques / Spezifikationen.



Abierto / Open / Aberto / Ouvert / Geöffnet.

50 x 50 x 84-88 cm

Plegado / Folded / Dobrado / Plié / Zusammengeklapp.

50 x 29 x 93 cm

Altura asiento / Seat height / Altura do assento / Hauteur de l'assise / Sitzhöhe.

48 cm

Peso / Weight / Peso / Poids / Gewicht.

6 kg.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**ES**

Conserve su recibo de compra para poder ejercer sus derechos como consumidor. La empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones en el producto con respecto a lo descrito en este manual de instrucciones.

**EN**

Keep up your receipt in order to exercise your right as a consumer. The company reserves the right to make alterations to the product with regards to the description included in this instruction manual.

**PT**

Guarde o seu recibo de compra para exercer os seus direitos enquanto consumidor. A empresa reserva-se o direito de es modificar o produto no que diz respeito ao descrito neste manual de instruções.

**FR**

Veillez conserver votre preuve d'achat afin d'exercer vos droits en tant que consommateur. La société se réserve le droit d'apporter des modifications au produit par rapport à ce qui est décrit dans ce mode d'emploi.

**DE**

Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, um Ihre Rechte als Verbraucher ausüben zu können. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen an dem in dieser Bedienungsanweisung beschriebenen Produkt vorzunehmen.

# playgroup

PLAY S.A.

Ronda Boada Vell, 6

08184 Palau-solità i Plegamans

Barcelona (Spain)

Tel: +34 938 648 027

Fax: +34 938 648 491

informacion@play.es

[www.playgrouponline.com](http://www.playgrouponline.com)

