

playcare

Care Plus



Instrucciones / Instructions / Instruções
Instructions / Anweisungen

Componentes / Components / Componentes /
Composants / Komponenten



ES

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Freno de mano | delanteras |
| 2. Empuñadura | 7. Asiento |
| 3. Palanca bloqueo freno | 8. Soporte lateral |
| 4. Ajuste de altura del manillar | 9. Respaldo |
| 5. Dispositivo de plegado | 10. Reflectante de seguridad |
| 6. Botón bloqueo ruedas | |

EN

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Handbrake | 6. Front wheel lock button |
| 2. Handle | 7. Seat |
| 3. Brake lock button | 8. Side support |
| 4. Handlebar height adjustment | 9. Backrest |
| 5. Folding device | 10. Safety reflectors |

PT

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Travão de mão | dianteira |
| 2. Cabo | 7. Assento |
| 3. Botão de bloqueio do travão | 8. Suporte lateral |
| 4. Regulação da altura do guiador | 9. Apoio |
| 5. Dispositivo dobrável | 10. Reflectante de segurança |
| 6. Botão de bloqueio da roda | |

FR

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Frein à main | avant |
| 2. Poignée | 7. Siège |
| 3. Bouton de verrouillage du frein | 8. Accoudoir latéral |
| 4. Réglage de la hauteur du guidon | 9. Dossier |
| 5. Dispositif de pliage | 10. Bande réfléchissante de sécurité |
| 6. Bouton de verrouillage roues | |

DE

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Handbremse | 7. Sitz |
| 2. Handgriff | 8. Seitenstütze |
| 3. Bremsverriegelungshebel | 9. Rückenlehne |
| 4. Lenker-Höhenverstellung | 10. Sicherheitsreflektor |
| 5. Falteinrichtung | |
| 6. Vorderräder-Blockierknopf | |

Freno de mano ruedas traseras / Handbrake rear wheels /
Freio da roda traseira / Frein à main roues arrière /
Hinterräder-Handbremse.




Bloqueo de las ruedas traseras / Rear wheel lock /
Bloqueio das rodas traseiras / Verrouillage des roues
arrière / Hinterräder-Blockierung.



Desbloqueo de las ruedas traseras / Rear wheel unlock /
Desbloqueio as rodas traseiras / Déverrouillage des
roues arrière / Lösen der Hinterräder-Blockierung.



Bloqueo de las ruedas delanteras / Front wheels lock /
Bloqueio das rodas dianteiras / Verrouillage des roues
avant / Vorderräder-Blockierung.

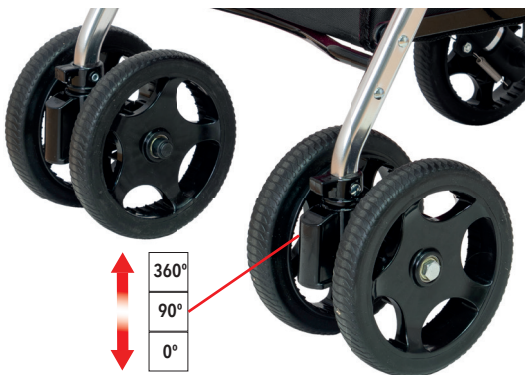

Empuñadura ajustable en altura / Height adjustable handle
/ Alça ajustável em altura / Poignée réglable en hauteur /
Höhenverstellbarer Handgriff.



Asiento - Tapa portaobjetos / Seat - Slide Top / Assento
- Tapa deslizante / Siège - Rabat compartiment de
rangement / Sitz - Abdeckung Ablagefach.



Dispositivo de plegado / Folding device / Dispositivo dobrável
/ Dispositif de pliage / Faltvorrichtung



Plegado compacto / Compact folding / Dobra compacta /
Pliage compact / Kompaktes Zusammenklappen.



Aviso

Está totalmente prohibido utilizar este carro de la compra como una silla de ruedas. Dispone de freno de seguridad indispensable para poder usar el carro como asiento. Peso máximo del usuario: 100 kg.

Notice

It is strictly forbidden to use this shopping cart as a wheelchair. It has a safety brake essential to use the cart as a seat. Maximum user weight: 100 kg.

Aviso

É estritamente proibido usar este carrinho de compras como cadeira de rodas. Tem um travão de segurança essencial para poder utilizar o carro como assento. Peso máximo do utente: 100 kg.

Avertissement

Il est strictement interdit d'utiliser ce caddie déambulateur comme fauteuil roulant. Il dispose d'un frein de sécurité, indispensable pour pouvoir utiliser le caddie comme siège. Poids maximal de l'utilisateur: 100 kg.

Hinweis

Es ist verboten, diesen Einkaufswagen als Rollstuhl zu benutzen. Er ist mit einer Sicherheitsbremse ausgestattet, die unbedingt betätigt werden muss, um den Wagen als Sitz zu benutzen. Max. Gewicht des Benutzers 100 kg.

Especificaciones / Specifications / Especificações /
Caractéristiques / Spezifikationen.



Abierto / Open / Aberto / Ouvert / Geöffnet.
52 x 57 x 90-97 cm

Plegado / Folded / Dobrado / Plié / Zusammengeklapp.
52 x 39 x 63 cm

Altura asiento / Seat height / Altura do assento / Hauteur de
l'assise / Sitzhöhe.
43 cm

Peso / Weight / Peso / Poids / Gewicht.
6 kg.

ES

Conserve su recibo de compra para poder ejercer sus derechos como consumidor. La empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones en el producto con respecto a lo descrito en este manual de instrucciones.

¡Aviso!: Debido a la constante actualización y mejora de nuestros productos, las imágenes mostradas en el manual de instrucciones o en la caja pueden no corresponder al 100% con el producto comercializado.

EN

Keep up your receipt in order to exercise your right as a consumer. The company reserves the right to make alterations to the product with regards to the description included in this instruction manual.

WARNING! Due the constant update and improvement of our products, the images shown in the instruction manual or on the box may not correspond 100% to the marketed product.

PT

Guarde o seu recibo de compra para exercer os seus direitos enquanto consumidor. A empresa reserva-se o direito de es modificar o produto no que diz respeito ao descrito neste manual de instruções.

AVISO! Devido à constante atualização e melhoria dos nossos produtos, as imagens apresentadas no manual de instruções ou na caixa podem não corresponder 100% ao produto comercializado.

FR

Veuillez conserver votre preuve d'achat afin d'exercer vos droits comme consommateur. La société se réserve le droit d'apporter des modifications au produit par rapport à ce qui est décrit dans ce mode d'emploi.


AVERTISSEMENT! En raison de la mise à jour et des améliorations constantes de nos produits, les visuels présentés dans le mode d'emploi ou sur la boîte peuvent ne pas se correspondre à 100 % au produit commercialisé.

DE

Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, um Ihre Rechte als Verbraucher ausüben zu können. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen an dem in dieser Bedienungsanweisung beschriebenen Produkt vorzunehmen. **WARNUNG!** Aufgrund der ständigen Aktualisierung und Verbesserung unserer Produkte entsprechen die in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung gezeigten Abbildungen möglicherweise nicht zu 100 % dem vermarkteten Produkt.

Imported by:  PLAY S.A.
Pol. Ind. Riera de Caldes
Ronda Boada Vell, 6
08184 Palau-solità i Plegamans
Barcelona (Spain)
Tel.: +34 938 64 80 27
informacion@play.es
www.playgrouponline.com

Basic UDI-DI: 842585836322JN

 NINGBO NEWKIND HOME CARE CO., LTD.
Room 1102, Building 2, INSURANCE INDUSTRY PARK,
172
Huxia Road Xiaying Street, Yinzhou area,
315104 Ningbo, China

playgroup

PLAY S.A.

Ronda Boada Vell, 6

08184 Palau-solità i Plegamans

Barcelona (Spain)

Tel: +34 938 648 027

informacion@play.es

www.playgrouponline.com

