

FICHA TÉCNICA - Arnés Bipedestación



Diseñado para realizar las transferencias con seguridad y comodidad tanto para el paciente como para el personal asistencial.

El arnés TECNIMOEM CARE, S.L. junto con la grúa POWERLIFT está diseñado y fabricado según la normativa UNE-EN ISO 10535:2007 Grúas para el traslado de personas con discapacidad. Requisitos y métodos de ensayo

**Por motivos de mejora de nuestros productos, Tecnimoem Care se reserva el derecho de cambiar especificaciones técnicas y/o imágenes de nuestros productos sin previo aviso.*

CARACTERÍSTICAS

Confeccionado con tratamiento **Thermy-tex** super-absorbente que anula eficazmente la reproducción de bacterias y la formación de olores.

Transpirable, acolchado con foam, ultraligero, de secado rápido y alta resistencia a la tracción.

Regulación en tres alturas (rojo, verde y amarillo) con anclaje de seguridad (azul).

FUNCIONES Y MODO DE EMPLEO

Diseñado para realizar las transferencias con seguridad y comodidad tanto para el paciente como para el personal asistencial.

Dispone de banda abdominal con velcro y correa de poliéster con hebilla de seguridad.

El arnés es adecuado para personas con movilidad de cabeza y sujeción de las piernas.

SEGURIDAD

No utilizar nunca con cargas superiores a la carga máxima de la grúa (marcada sobre la misma) o del arnés (200kg.).

Compruebe que el arnés se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo con pacientes.

Se recomienda usarlo previamente en personas sanas para familiarizarse con él.

No utilizar el arnés si presenta signos de rasgado, desgaste o deformación.

No usar el anclaje final de seguridad de color azul.


LAVADO Y SECADO

Lavado recomendado a 30º con jabón neutro. No usar lejía ni lavar en seco. No admite planchado. Secado sobre superficie plana. No exponer al sol o fuente de calor. No admite secadora.



Asegúrese de que el arnés tiene el tamaño y características adecuados al paciente

Medidas aproximadas (en cm.)

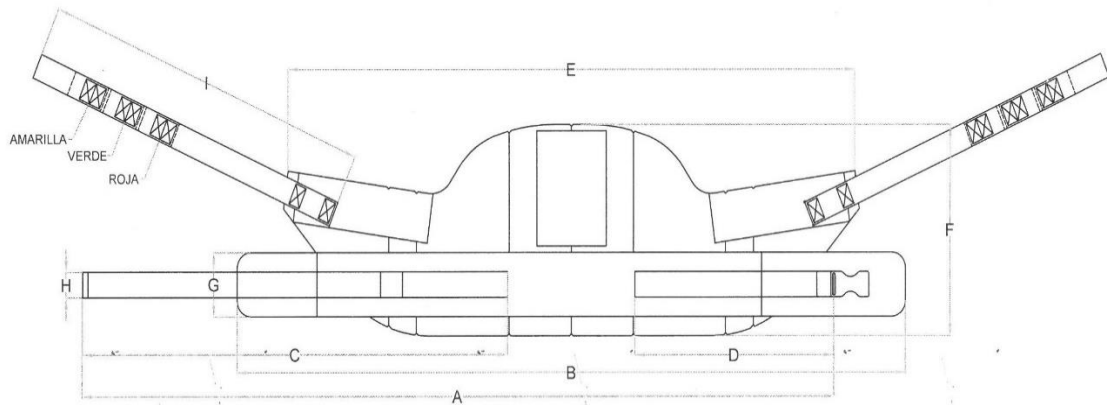

Medidas aprox. (cm)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Peso
Talla S	119	114	65	34	98	33	10	4	58.5	800 gr
Talla M	134	140	69	45	98	33	10	4	58.5	850 gr
Talla L	180	169	106	54	98	33	10	4	58.5	900 gr

*TALLA S, recomendada para contorno máximo de 100cm

*TALLA M, recomendada para contorno máximo de 130cm

*TALLA L, recomendada para contorno máximo de 160cm

Tecnimoem** Care** desarrolla, fabrica y distribuye camas, somieres, grúas y complementos para uso geriátrico y doméstico.

En un mundo donde la calidad de vida llegando a la edad madura es el bien más valorado, **Tecni**moem** Care** pone todo su esfuerzo en la investigación continua y en el desarrollo de elementos para el descanso que precisan las personas que, por problemas físicos, de edad, o simplemente que valoran la ergonomía y la adaptabilidad, eligen nuestros productos.

Tecnimoem** Care**, en su esfuerzo de innovación, incorpora los mejores materiales del mercado con acabados perfectos que superan todas las normas de calidad y son los que nos diferencian y nos hacen ser elegidos por nuestros clientes.



TECNIMOEM CARE S.L.

CTRA. Logroño-Mendavia Km.5
31230 VIANA (Navarra) – ESPAÑA
[tecni**moem**@tecni**moem**.com](mailto:tecnimoem@tecnimoem.com)

Telf. +34 948 64 62 13
Fax. +34 948 64 63 80
[www.tecni**moem**.com](http://www.tecnimoem.com)