

## FICHA TÉCNICA - Silla MOEM Autopropulsable



**MOEM** es una silla de ducha y aseo para facilitar la higiene de personas con discapacidad de movimiento.

Puede usarse en ducha, lavabo y sobre inodoro, así como para transportar a pacientes de un peso máximo de **150 Kg.**

La Silla de baño está considerada producto sanitario de clase 1 según el Reglamento Europeo 2017/745 de Productos Sanitarios (MDR).

Por ello está destinada a ser utilizada en seres humanos con fines de tratamiento o alivio de una enfermedad, así como al tratamiento, alivio o compensación de una lesión o una deficiencia.

Cumple con la Norma:


\* **UNE-EN 12183** "Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de ensayo."

*\*Por motivos de mejora de nuestros productos, Tecni**moem** Care se reserva el derecho de cambiar especificaciones técnicas y/o imágenes de nuestros productos sin previo aviso.*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARGA MÁXIMA	<b>150KG</b>	
PESO	<b>16,8KG.</b>	
RUEDAS	Delanteras	Ø125mm. con freno
	Traseras	<b>Ø610mm.</b>
BASTIDOR EXTERIOR, pintura epoxi-poliéster	Tubo acero Ø25x1,5mm Pletina acero 30x5mm.	
REPOSABRAZOS	Extraíble	
REPOSAPIÉS	Extraíble y regulable en 5 posiciones	
TAPA ASIENTO	Extraíble y abatible	
Tornillería en acero inoxidable		
Respaldo, reposabrazos, asiento, reposapiés, tapa asiento, orinal, en polipropileno		
Asidero y soportes ruedas, en polipropileno y fibra de vidrio		
Palanca de freno en cada rueda trasera		
Altura suelo-asiento: 51 cm		
Espacio libre bajo inodoro: 47.5 cm		
Espacio libre entre reposabrazos: 42 cm		

DIMENSIONES DE LA SILLA

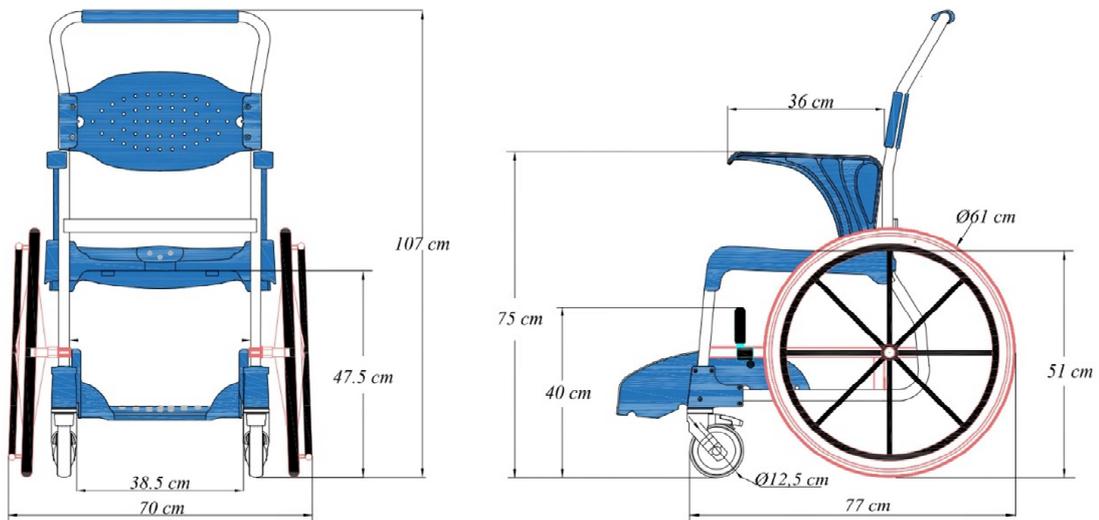

### RUEDAS DELANTERAS CON FRENO

La rueda se bloquea pisando el pedal del freno.

La silla queda más estable si las ruedas quedan giradas hacia el exterior



### REPOSABRAZOS EXTRAÍBLES



### TAPA ASIENTO

Tapa asiento fácilmente extraíble



### REPOSAPIÉS

Desmontable y fácilmente manejable

Regulable en 5 posiciones



### ACCESORIOS

#### ASIENTO SILLA MOEM

Asiento de poliuretano de dos componentes (poliol e isocianato), sin CFCs ni HCFCs.

Recubierto con pintura en color azul.

Se ajusta al asiento fijo de la silla.

Disponibile en dos diseños



ASIENTO ABIERTO

Peso 900 gr.

Medidas aprox. 50x52x12cm.



ASIENTO CERRADO

Peso 940 gr.

Medidas aprox. 50x52x12cm.

#### CINTURÓN SILLA MOEM

Cinturón abdominal para sujetar al usuario a la silla



Tejido en malla de poliéster 100% . Ribete de acrílico de 3cm (azul). Cintas de sujeción en poliéster. Se ajusta al bastidor de la silla.

Banda de 45 x 11.5cm aprox.

Contorno cinta 110cm aprox.

Peso 100 gr.

**Tecnimoem Care** desarrolla, fabrica y distribuye camas, somieres, grúas, sillas y complementos para uso geriátrico y doméstico.

En un mundo donde la calidad de vida llegando a la edad madura es el bien más valorado, **Tecnimoem Care** pone todo su esfuerzo en la investigación continua y en el desarrollo de elementos para el descanso que precisan las personas que por problemas físicos, de edad o simplemente que valoran la ergonomía y la adaptabilidad, eligen nuestros productos.

**Tecnimoem Care**, en su esfuerzo de innovación, incorpora los mejores materiales del mercado con acabados perfectos que superan todas las normas de calidad y son los que nos diferencian y nos hacen ser elegidos por nuestros clientes.

SNR: ES-MF-000019199  
Según (EU) 2017/745 MDR



**TECNIMOEM CARE S.L.**

CTRA. Logroño-Mendavia Km.5  
31230 VIANA (Navarra) – ESPAÑA  
[tecnimoem@tecnimoem.com](mailto:tecnimoem@tecnimoem.com)

Telf. +34 948 64 62 13  
Fax. +34 948 64 63 80  
[www.tecnimoem.com](http://www.tecnimoem.com)